



Exporter - Graver - Présenter

- ⇒ C'est grâce aux collections que "Exporter graver présenter" prend tout son sens
- ⇒ On peut y exporter un ensemble d'images, les graver sur CD (présentation web), ou réaliser facilement des fiches conseils (on peut ensuite les retravailler si nécessaire dans "outils - documents types")

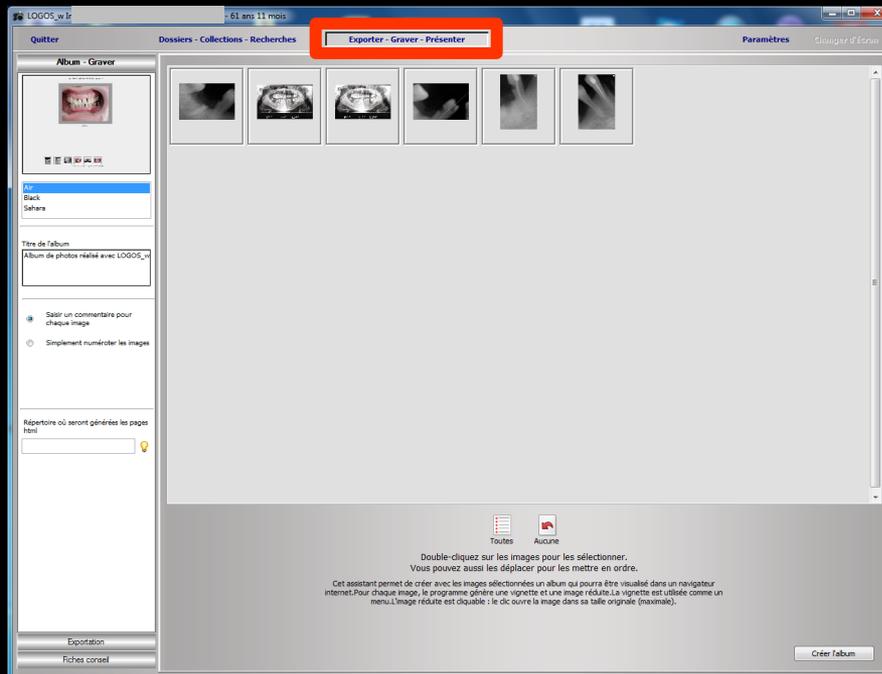




⇒ Lorsque **Exporter-Graver-Présenter** est sélectionné, la boîte à outils située à la partie gauche de la fenêtre comporte **trois onglets**

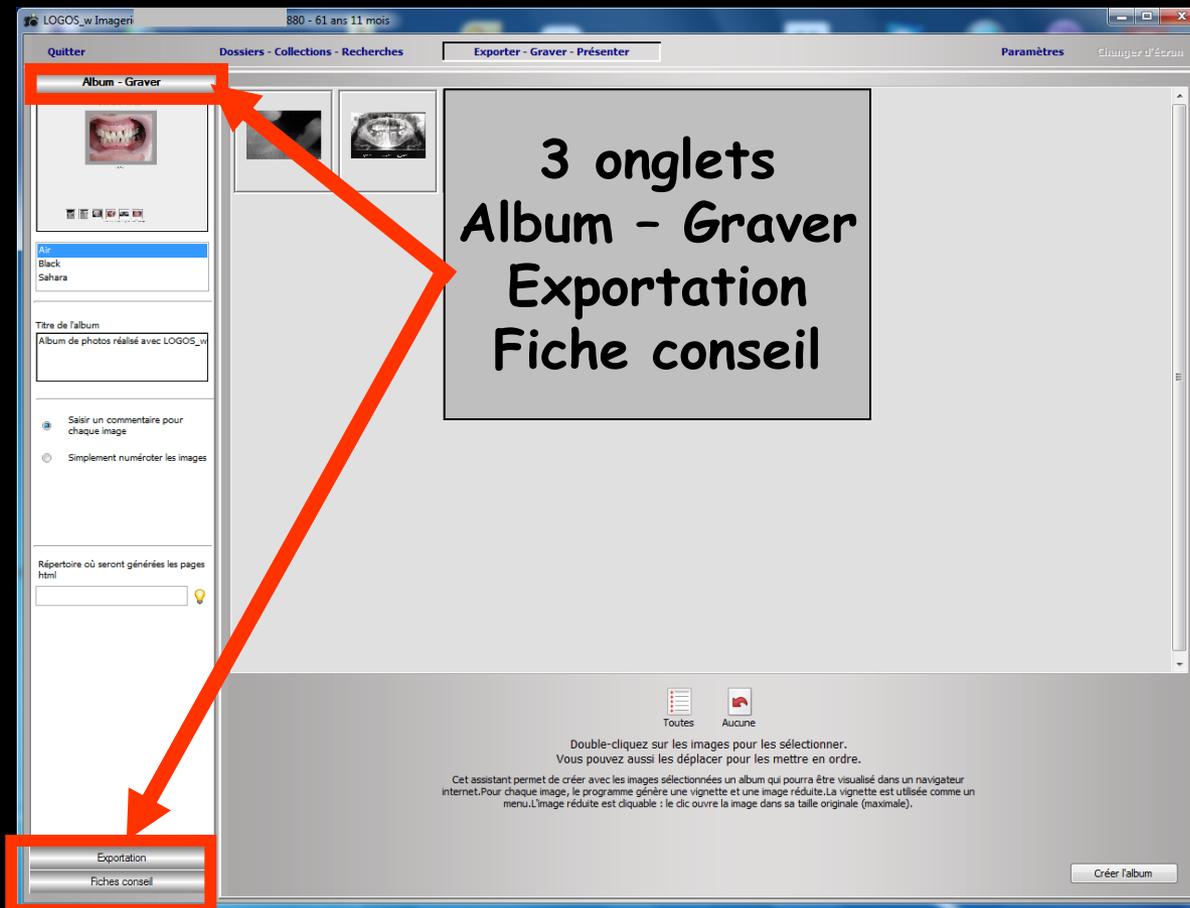

Onglet "Album - Graver"

Trois fonds d'écran peuvent être utilisés

- ⇒ Air (fond grisé)
- ⇒ Black (fond noir)
- ⇒ Sahara (fond brun)

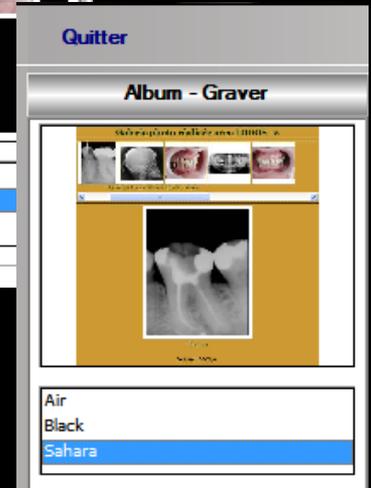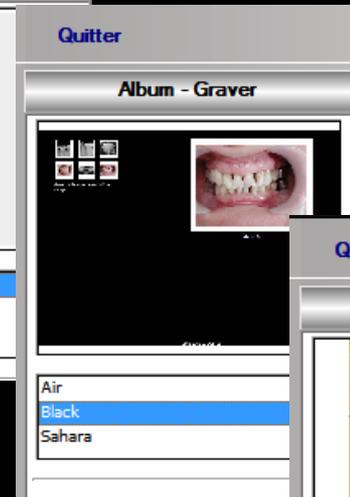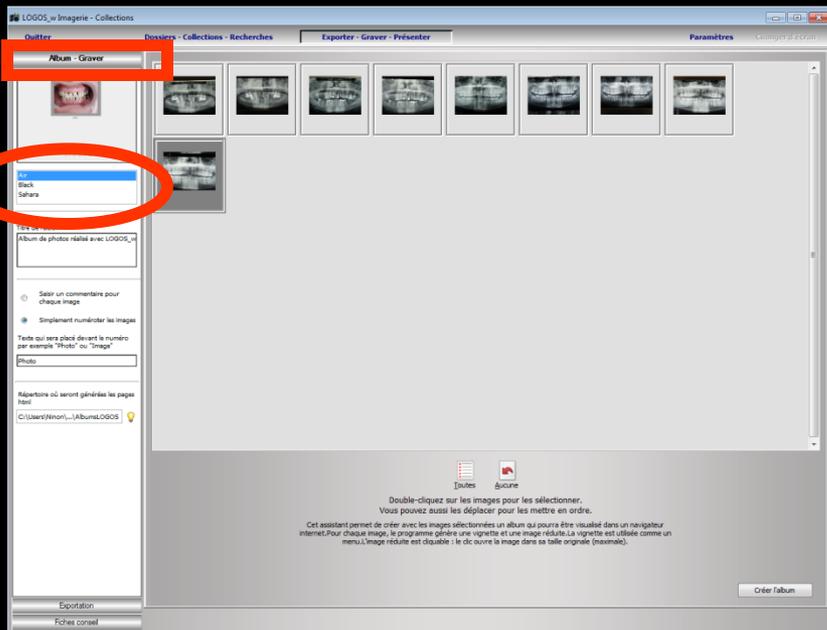

Onglet "Album - Graver"

- ⇒ L'album aura un **titre**
- ⇒ Chaque image de l'album pourra bénéficier d'un **commentaire** ou sera affectée d'un **numéro** en choisissant le texte qui apparaîtra devant le **numéro**

Album - Graver



Air
Black
Sahara

Titre de l'album
Album de photos réalisé avec LOGOS_w

Saisir un commentaire pour chaque image
 Simplement numéroter les images

Répertoire où seront générées les pages html

⇒ Chaque image de l'album pourra bénéficier d'un **commentaire** ou sera affectée d'un **numéro** en choisissant le texte qui apparaîtra devant le numéro

Chaque image est commentée

Entrez un court commentaire sur l'image et validez



Panoramique départ



OK Annuler

Onglet "Album - Graver"

⇒ Il faudra choisir le répertoire dans lequel seront générées les pages de l'album

⇒ Clic sur l'ampoule jaune

⇒ Sinon message de rappel

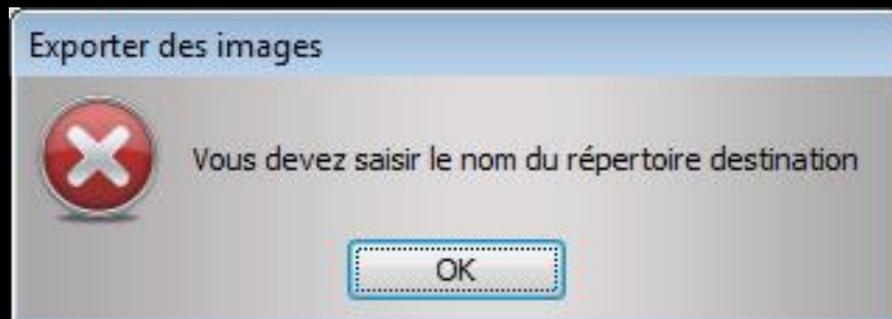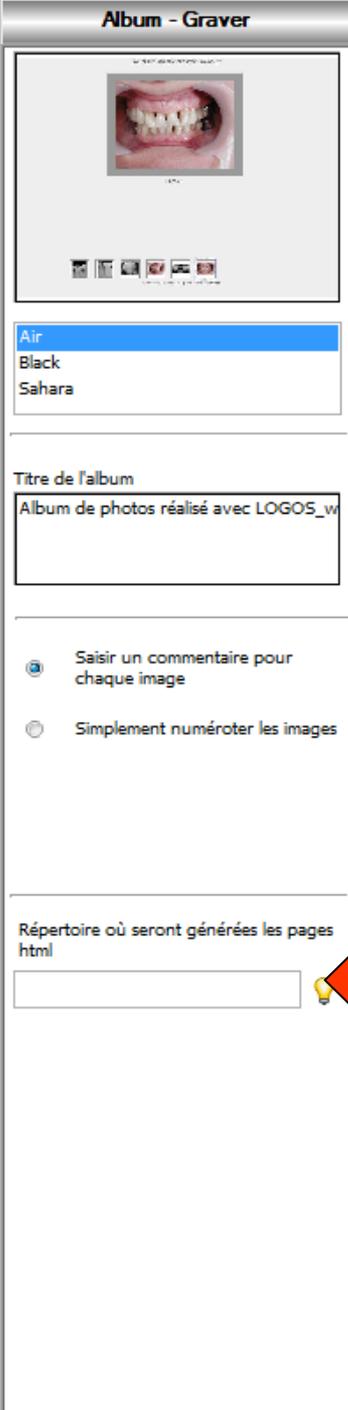



Air
Black
Sahara

Titre de l'album

Album de photos réalisé avec LOGOS_w

- Saisir un commentaire pour chaque image
- Simplement numéroter les images


Répertoire où seront générées les pages html



Sélectionnez un répertoire...



Sélectionnez le répertoire où va être créé l'album HTML

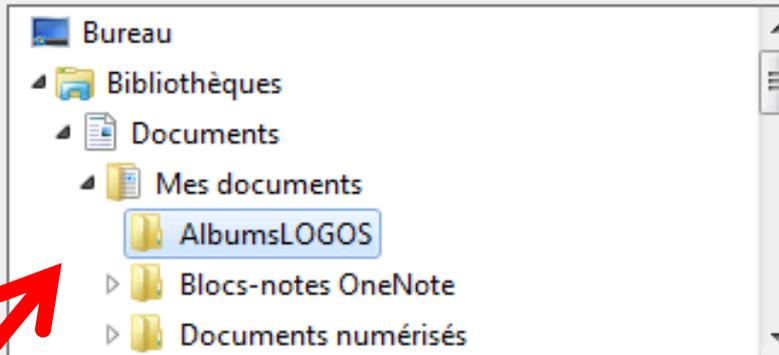

Dossier : AlbumsLOGOS

Créer un nouveau dossier

OK

Annuler



Air
Black
Sahara

Titre de l'album

Album de photos réalisé avec LOGOS_w

- Saisir un commentaire pour chaque image
- Simplement numéroter les images

Texte qui sera placé devant le numéro par exemple "Photo" ou "Image"

Photo

Répertoire où seront générées les pages html

C:\Users\Ninon\...\AlbumsLOGOS 

Quitter

Dossiers - Collections - Recherches

Exporter - Graver - Présenter

Paramètres

Changer d'écran

Album - Graver



Air
Black
Sahara

Titre de l'album

Album de photos réalisé avec

Saisir un commentaire pour chaque image

Simplement numéroter les images

Texte qui sera placé devant le numéro, par exemple "Photo" ou "Image"

Photo

Répertoire où seront générées les pages html

C:\Users\Ninon\...\AlbumsLOGOS



Pour créer un album
il faudra avant tout
choisir les images
que l'on va mettre dedans
sinon message d'erreur



Toutes



Aucune

Double-cliquez sur les images pour les sélectionner.
Vous pouvez aussi les déplacer pour les mettre en ordre.

Cet assistant permet de créer avec les images sélectionnées un album qui pourra être visualisé dans un navigateur internet. Pour chaque image, le programme génère une vignette et une image réduite. La vignette est utilisée comme un menu. L'image réduite est cliquable : le clic ouvre la image dans sa taille originale (maximale).

Exportation

Fiches conseil

Créer l'album

Album - Graver



X

X

X

X

X

X

Air

Black

Sahara

Titre de l'album

Album de photos réalisées

 Saisir un commentaire pour chaque image

 Simplement numérotées

Texte qui sera placé devant le numéro par exemple "Photo" ou "Image"

Photo

Répertoire où seront générés les fichiers html

C:\Users\Ninon\...\Album

Sélection des images que vous désirez placer dans l'album en double cliquant sur chacune de celles que vous désirez. Elles seront marquées d'une croix.

Vous pourrez ensuite les déplacer pour en modifier l'ordre. Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur le bouton "Créer l'album".

Puis clic



Toutes



Aucune

Double-cliquez sur les images pour les sélectionner. Vous pouvez aussi les déplacer pour les mettre en ordre.

Cet assistant permet de créer avec les images sélectionnées un album qui pourra être visualisé dans un navigateur internet. Pour chaque image, le programme génère une vignette et une image réduite. La vignette est utilisée comme un menu. L'image réduite est cliquable : le clic ouvre la image dans sa taille originale (maximale).


 Créer l'album

Exportation

Fiches conseil

Album - Graver



Le traitement est terminé. L'album d'images a été généré. Vous pouvez maintenant le tester.

[Test avec le navigateur par défaut](#)

3 possibilités

Si plusieurs navigateurs Internet sont installés sur votre machine, utilisez ce bouton pour choisir lequel utiliser.

[Test avec le navigateur de votre choix](#)

Nom de la 1ère page de l'album



Graver un CD ou un DVD

Titre de l'album

Saisir un commentaire pour chaque image

Simplement numéroter les images

Texte qui sera placé devant le numéro par exemple "Photo" ou "Image"

Répertoire où seront générées les pages html

Exportation

Fiches conseil

Recommencer

Créer l'album

L'album généré peut être visualisé avec le navigateur par défaut ou l'un des navigateurs internet préalablement installés sur votre poste et que vous choisirez dans la liste. Il peut aussi être gravé sur un CD ou un DVD.

Test avec le navigateur par défaut ou le navigateur de votre choix

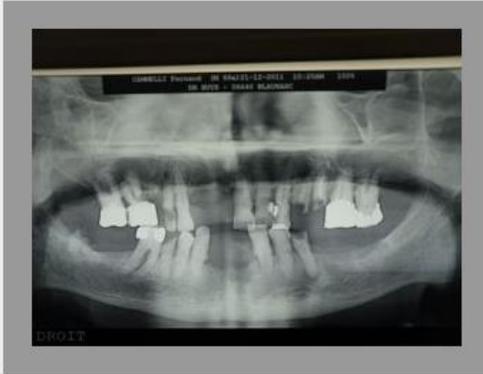


Photo 1



Cliquez sur la vignette pour afficher l'

Ouvrir avec

Choisissez le programme à utiliser pour ouvrir ce fichier :

Fichier : WDGal0001.html

Programmes recommandés

- Firefox
Mozilla Corporation
- Internet Explorer
Microsoft Corporation
- OpenOffice.org Calc
OpenOffice.org
- OpenOffice.org Writer
OpenOffice.org
- Safari
Apple Inc.

Autres programmes

Toujours utiliser le programme sélectionné pour ouvrir ce type de fichier

Parcourir...

Si le programme que vous désirez n'est pas dans la liste ou sur votre ordinateur, vous pouvez [rechercher le programme approprié sur le Web.](#)

OK Annuler

Album - Graver



Air
Black
Sahara

Titre de l'album

Album de photos réalisé avec LOGOS_w

- Saisir un commentaire pour chaque image
- Simplement numéroter les images

Texte qui sera placé devant le numéro par exemple "Photo" ou "Image"

Photo

Répertoire où seront générées les pages html

C:\Users\Ninon\...\AlbumsLOGOS

Exportation

Fiches conseil

Le traitement est terminé. L'album d'images a été généré. Vous pouvez maintenant le tester.

[Test avec le navigateur par défaut](#)

Si plusieurs navigateurs Internet sont installés sur votre machine, utilisez ce bouton pour choisir lequel utiliser.

[Test avec le navigateur de votre choix](#)

Nom de la 1ère page de l'album

C:\Users\Ninon\Documents\AlbumsLOGOS\WDGAL0001.html



Graver un CD ou un DVD



Possibilité de graver l'album sur un CD ou un DVD

Recommencer

Créer l'album

Onglet "Exportation"

The screenshot displays the 'LOGOS_w Imagerie - Collections' application window. The 'Exportation' tab is active, showing a grid of dental X-ray images. The interface includes a top menu bar with 'Quitter', 'Dossiers - Collections - Recherches', 'Exporter - Graver - Présenter', 'Paramètres', and 'Changer d'écran'. The main area is divided into a left sidebar with settings and a central image grid. The settings sidebar includes fields for 'Album - Graver', 'Exportation', 'Repertoire où seront créés les fichiers exportés', 'Dénomination des fichiers', 'Préfixe', 'Date (AAAA-MM-JJ)', 'Séquence - Total', 'Paramètres des images', 'Format des fichiers' (with 'Format d'origine' selected), 'Redimensionner les images', 'Largeur maximum (en pixels)', 'Hauteur maximum (en pixels)', 'Regrouper les images au sein d'un fichier zip', and 'Nom du fichier'. The image grid shows eight X-ray images, with the seventh one selected. At the bottom, there are 'Toutes' and 'Aucune' buttons, instructions for selecting and ordering images, and an 'Exporter les fichiers' button.

This close-up shows the left sidebar of the software. It features a top section with icons, a section with 'Album - Graver' and 'Exportation' buttons, and a section with 'Repertoire où seront créés les fichiers exportés' and 'Dénomination des fichiers' fields. Below that are 'Paramètres des images' and 'Format des fichiers' options. At the bottom, there is a 'Repertoire où seront générées les pages html' field and an 'Exportation' button with 'Fiches conseil' below it. A red arrow points from the 'Exportation' button in this sidebar to the 'Exportation' tab in the main window.

Onglet "Exportation"

Exportation

Répertoire où seront créés les fichiers exportés

Dénomination des fichiers

Préfixe

Date (AAAAMMJJ)

Séquence - Total

Paramètres des images

Format des fichiers

Format d'origine

jpeg

Redimensionner les images


Largeur maximum (en pixels)

Hauteur maximum (en pixels)

Regrouper les images au sein d'un fichier zip

Nom du fichier

⇒ Choix du répertoire où seront créés les fichiers exportés

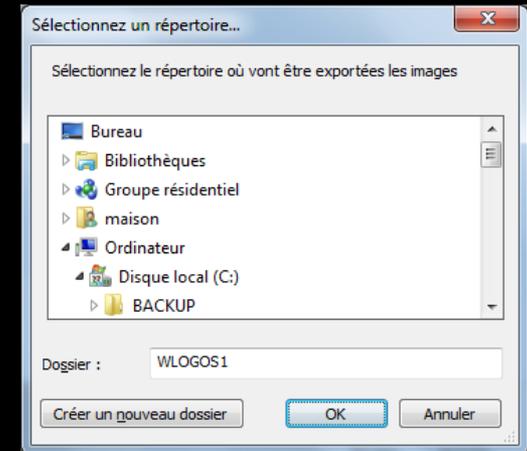

⇒ Après avoir choisi le répertoire où seront créés les fichiers exportés, il faut définir comment ils seront nommés

Onglet "Exportation"

Exportation

Répertoire où seront créés les fichiers exportés

C:\WLOGOEXPORT

Dénomination des fichiers

Préfixe PANORAMIQUES

Date (AAAAMMJJ)

Séquence - Total

Séquence - Total

Séquence

Paramètres des images

Format des fichiers

Format d'origine

jpeg

Redimensionner les images

Largeur maximum (en pixels)

Hauteur maximum (en pixels)

Regrouper les images au sein d'un fichier zip

Nom du fichier

⇒ **Dénomination des fichiers**

⇒ **Avec ou sans la date**

⇒ **Avec le numéro de fichier dans la séquence (Séquence totale)**

⇒ **Ou séquence, etc...**

Onglet "Exportation"

Paramètres des images

- ⇒ Format d'origine
- ⇒ Ou format JPEG
- ⇒ Nécessité ou non de redimensionner les images (renseignez les valeurs en nombre de pixels : largeur et hauteur maximum en pixels)

The screenshot shows the 'Exportation' dialog box with the following fields and options:

- Répertoire où seront créés les fichiers exportés:** C:\WLOGOEXPORT
- Dénomination des fichiers:**
 - Préfixe: PANORAMIQUES
 - Date (AAAAMMJJ)
 - Séquence - Total
- Paramètres des images (highlighted in orange):**
 - Format des fichiers:
 - Format d'origine
 - jpeg
 - Redimensionner les images
 - Largeur maximum (en pixels): []
 - Hauteur maximum (en pixels): []
- Regrouper les images au sein d'un fichier zip
- Nom du fichier: []

Onglet "Exportation"

Exportation

Répertoire où seront créés les fichiers exportés

C:\WLOGOSEXPORT

Dénomination des fichiers

Préfixe PANORAMIQUES

Date (AAAAMMJJ)

Séquence - Total

Paramètres des images

Format des fichiers

Format d'origine

jpeg

Redimensionner les images

Largeur maximum (en pixels)

Hauteur maximum (en pixels)

Regrouper les images au sein d'un fichier zip

Nom du fichier

Paramètres des images

⇒ Si vous souhaitez regrouper ou non les images au sein d'un fichier .zip

⇒ Donnez un nom au fichier .zip

Regrouper les images au sein d'un fichier zip

Nom du fichier PANORAMIQUES2012

Fiches conseil

Album - Graver

Exportation

Répertoire où seront créés les fichiers exportés

C:\WLOGOEXPORT

Dénomination des fichiers

Préfixe PANORAMIQUES

Date (AAAAMMJJ)

Séquence - Total

Paramètres

Form

Largeur max

Hauteur max


Regroupe fichier zip

Nom du fichier

Fiches conseil



Pour exporter les fichiers il faudra avant tout choisir les images que l'on va mettre dedans sinon message d'erreur

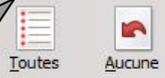

Double-cliquez sur les images pour les sélectionner. Vous pouvez aussi les déplacer pour les mettre en ordre.

Cet assistant permet d'exporter les fichiers des images sélectionnées. l'ensemble des images exportées peut être regroupé à l'intérieur d'un fichier d'archive au format zip.

Exporter les fichiers

Exporter des images



Sélectionnez d'abord les images à utiliser.

OK

Sélectionnez les images désirées comme pour
créer un album(voir onglet Album-Graver)
Lorsque vous êtes satisfait? appuyez sur le bouton
"Exporter les fichiers"

Album - Graver

Exportation

Répertoire où seront créés les fichiers exportés
C:\WLOGOSEXPORT

Dénomination des fichiers
Préfixe PANORAMIQUES
 Date (AAAAMMJJ)
Séquence - Total

Paramètres des images

Format des fichiers
 Format d'origine
 jpeg
 Redimensionner les images

Largeur maximum (en pixels)
Hauteur maximum (en pixels)

Regrouper les images au sein d'un fichier zip
Nom du fichier PANORAMIQUES2012

Fiches conseil




Toutes Aucune

Double-cliquez sur les images pour les sélectionner.
Vous pouvez aussi les déplacer pour les mettre en ordre.

Cet assistant permet d'exporter les fichiers des images sélectionnées. l'ensemble des images exportées peut être regroupé à l'intérieur d'un fichier d'archive au format zip.

Exporter les fichiers

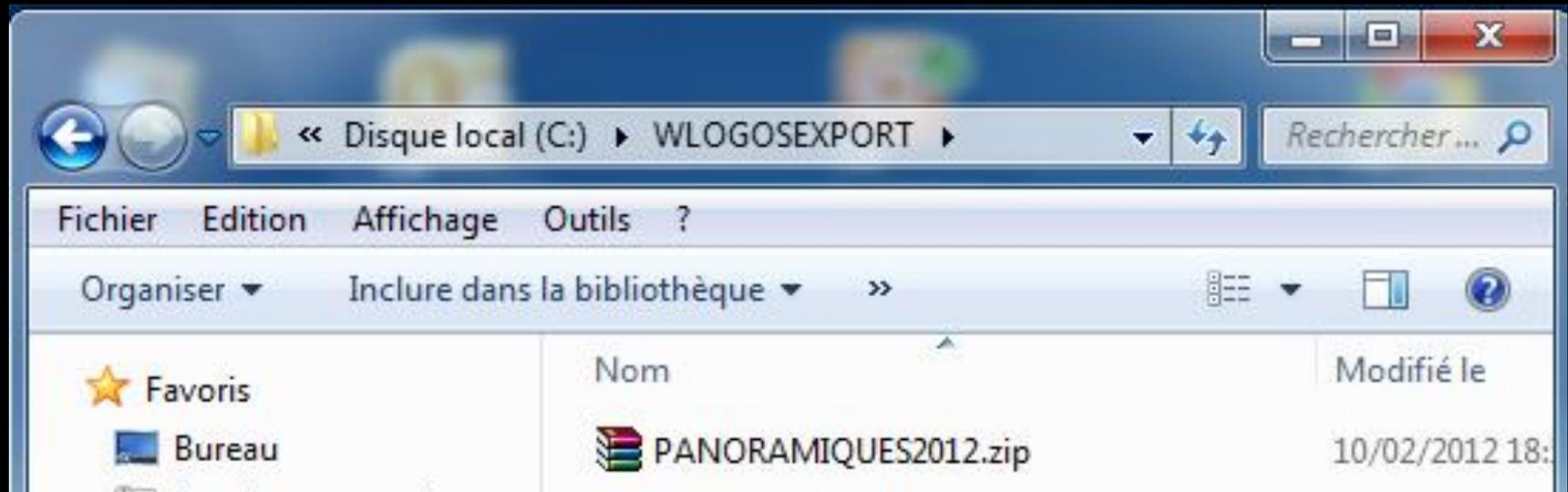

⇒ Les fichiers exportés sont bien dans le répertoire créé auparavant à cet effet

⇒ En cas de doublons dans le répertoire d'exportation

⇒ Message de rappel



Quitter

Dossiers - Collections - Recherches

Exporter - Graver - Présenter

Paramètres

Changer d'écran

Album - Graver

Exportation

Répertoire où seront créés les fichiers exportés

C:\WLOGOEXPORT 

Dénomination des fichiers

Préfixe PANORAMIQUES

 Date (AAAAMMJJ)

Séquence - Total ▼

Paramètres des images

Format des fichiers

 Format d'origine jpeg Redimensionner les imagesLargeur maximum (en pixels) Hauteur maximum (en pixels) Regrouper les images au sein d'un fichier zip

Nom du fichier PANORAMIQUES2012



Graver un CD ou un DVD

Les fichiers exportés
pourront être gravés
sur un CD ou un DVD

Recommencer

Exporter les fichiers

Fiches conseil

Onglet "Fiches conseil"

The screenshot displays the 'LOGOS_w Imagerie - Collections' application window. The interface is divided into several sections:

- Left Panel (Exportation):** Contains a list of albums (Air, Black, Sahara), a title field (Album de photos réalisée avec LOGOS_w), a comment field (Photo), and a directory field (C:\User...\ExportCollectionLOGOS). At the bottom, the 'Fiches conseil' tab is highlighted with a red box.
- Top Panel (Dossiers - Collections - Recherches):** Features a menu with 'Album - Graver', 'Exportation', and 'Fiches conseil' (highlighted with a red box).
- Main Area:** Displays a grid of dental X-ray images. Below the grid, there are options for '3 images par page 1-1-1', '6 images par page 2-2-2', '2 images par page 1-1', '3 images par page 2-1', and '5 images par page 1-2-2'. There are also fields for 'Titre de la fiche conseil' (Fiche conseil réalisée avec LOGOS_w) and 'Nom de la fiche conseil'. At the bottom right, there are buttons for 'Créer un fichier PDF' and 'Créer la fiche conseil'.
- Bottom Panel:** Contains instructions: 'Double-cliquez sur les images pour les sélectionner. Vous pouvez aussi les déplacer pour les mettre en ordre.' and a note: 'Cet assistant permet d'utiliser les images sélectionnées pour réaliser facilement une fiche conseil qui pourra être utilisée dans LOGOS_w.'

- ⇒ Permet d'utiliser votre base d'images pour imprimer des fiches personnalisées à l'usage de vos patients
- ⇒ Ces fiches une fois créées seront stockées dans les "documents types" de LOGOS_w

Onglet "Fiches conseil"

Fiches conseil



3 images par page 1-1-1
6 images par page 2-2-2
2 images par page 1-1
3 images par page 2-1
5 images par page 1-2-2

Titre de la fiche conseil
Fiche conseil réalisée avec LOGOS_w

Nom de la fiche conseil

- ⇒ Le nombre d'images par page peut être choisi
- ⇒ Chaque image pourra bénéficier d'un commentaire que vous devrez alors saisir lors de la réalisation de la fiche
- ⇒ Le titre de la fiche conseil apparaîtra en titre à l'impression
- ⇒ Le nom de la fiche conseil vous permettra de les classer

⇒ Chaque image pourra bénéficier d'un commentaire que vous devrez alors saisir lors de la réalisation de la fiche

Chaque image est commentée



Saisissez le commentaire sur l'image et validez

Ne pas saisir de commentaire pour les photos suivantes

OK Annuler

Quitter

Dossiers - Collections - Recherches

Exporter - Graver - Présenter

Paramètres

Changer d'écran

Album - Graver

Exportation

Fiches conseil



3 images par page 1-1-1

6 images par page 2-2-2

2 images par page 1-1

3 images par page 2-1

5 images par page 1-2-2

Titre de la fiche conseil

Fiche conseil réalisée avec LOGOS_w

Nom de la fiche conseil



Toutes



Aucune

Double-cliquez sur les images pour les sélectionner.
Vous pouvez aussi les déplacer pour les mettre en ordre.

...erra être utilisée

Créer un fichier PDF



Créer la fiche conseil

⇒ Sélectionnez les images désirées, comme pour créer un album (voir onglet Album-Graver)

⇒ Lorsque vous êtes satisfait, appuyez sur le bouton "Créer un fichier PDF" ou "Créer la fiche conseil"

Onglet "Fiche conseil"

⇒ Dans le cas de la création d'un fichier PDF, celui-ci se retrouvera dans le répertoire créé à cet effet

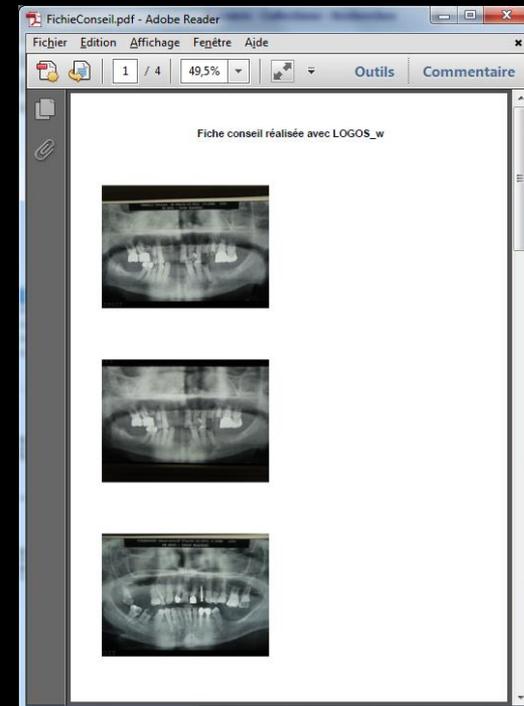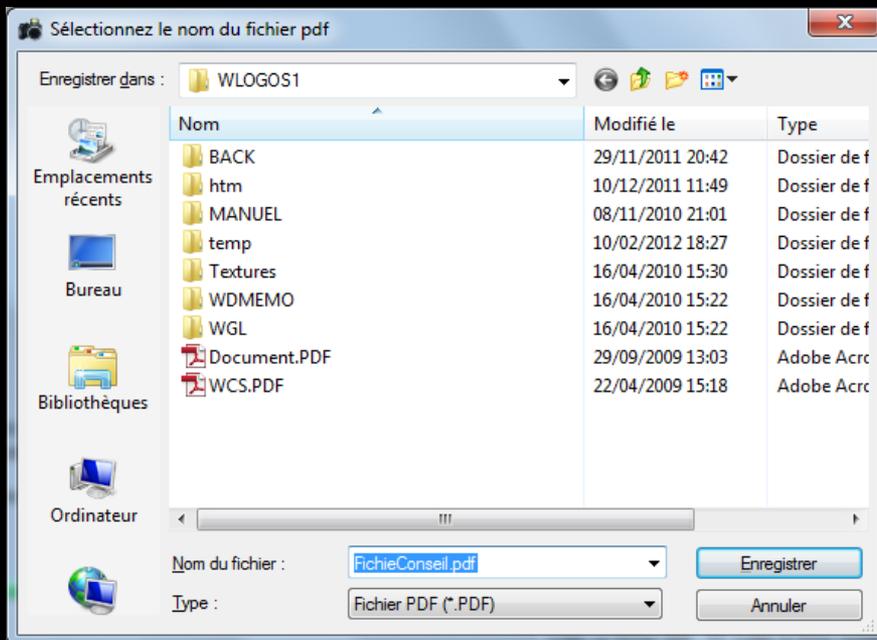

Onglet "Fiche conseil"

⇒ Dans le cas de la création d'une fiche conseil, celle-ci se retrouvera dans les documents types - fiches conseils

